


Technische Daten

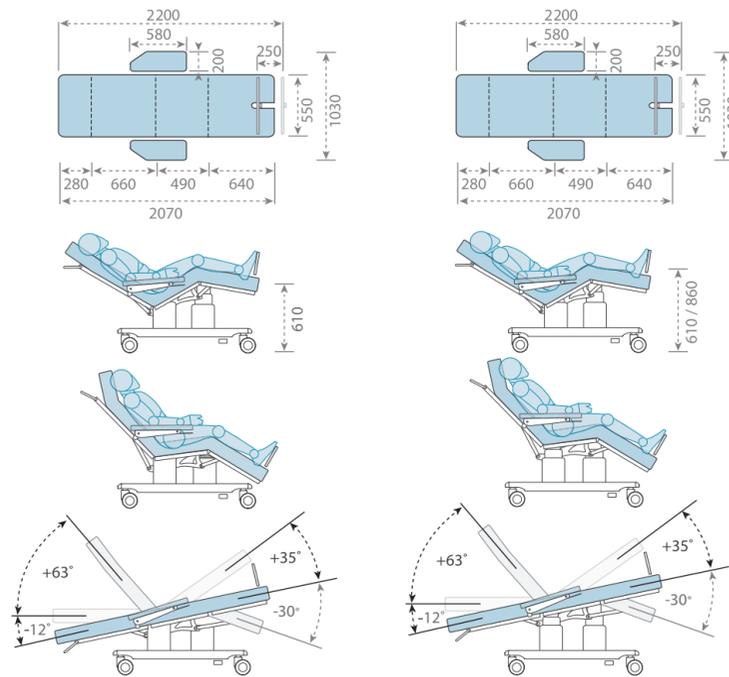


Ausstattungs- und Zubehörverzeichnis

	TCZ-EX	TCZ-LUX
Stuhlhöhe - Polsterung miteingerechnet	61 cm	61-86 cm
Stuhlhöhe - Polsterung nicht miteingerechnet	47 cm	47-72 cm
zulässige Belastung	250 kg	250 kg
Schiebegriffe	●	●
Papierrollenhalter – NZP1-Z	○	○
verstellbare Fußstütze – FR-Z	○	○
Kissen für Fußstütze – BZNI-Z	○	○
Infusionsständerhalterung, rechts – SIFHI-Z-R	○	○
Infusionsständerhalterung, links – SIFHI-Z-L	○	○
Infusionsständer – SIF1-Z	○	○
Normschiene am Sitzteil (Paar) – LE1-Z	○	○
Seitenschutz für Armstützen (Paar) – HRP-Z	○	○
PVC-Schutzüberzug für Beinteil – PVC1-Z	○	○
PVC-Schutzüberzug für Beinteil mit Fußstütze – PVC1-FR-Z	○	○
PVC-Schutzüberzug für Armstütze – PVC3-Z	○	○
zentral blockierbare Rollen (Ø 100 mm) – SER-CK1-Z	●	●
zentral blockierbare antistatische Rollen (Ø 100 mm) – AC1-CK-Z	○	○
große zentral blockierbare antistatische Rollen (Ø 125 mm) – AC2-CK-Z	○	○
Potentialausgleich-Steckverbinder – PPEQ	○	○
Akkubetrieb – BB-Z	○	○

Serienmäßig ● Option ○

Farbkarte PU

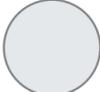-  231 light sky gray
-  132 sky blue
-  133 dark sky blue



Therapiestuhl ZeroG

Wo die Zeit dahin fliegt!



Schiebegriffe



manuell verstellbares
Kopfteil

sehr weiche Polsterung
für vollkommenen
Komfort (14 cm)

einfach verstellbare
Armstützen

zentral blockierbare
Rollen (Ø 100 mm)

Therapiestuhl **ZeroG exclusive**
Model: TCZ-EX

„Der Handschalter ist einfach zu bedienen, die Piktogramme sind klar und verständlich. Wenn ich den Stuhl in die ZeroG-Position stelle, bewege ich mich bis zum Ende der Therapie nicht. Wegen der außerordentlich weichen und komfortablen Polsterung war ich beruhigt und ohne Rückenschmerzen. Es fühlte sich wie Sitzen auf einer weichen Wolke an.“

(Maja, Patientin der Dialyse-Abteilung)



verstellbare Fußstütze
(Option)



Infusionsständer
(Option)

Papierrollenhalter
(Option)

Infusionsständerhalterung, links
(Option)

Normschiene
(Option)

elektrische
Höhenverstellung

PVC-Schutzüberzug für
Beinteil mit Fußstütze
(Option)

zentral blockierbare
antistatische Rollen (Ø 100 mm)
(Option)

Therapiestuhl **ZeroG luxury**
Model: TCZ-LUX

„Der Therapiestuhl ZeroG ist Luxus pur - sowohl für die Patienten, die sich eigenständig in ihrer gewünschte Position ausrichten können, wie auch für das medizinische Personal, denn mit dem Einstellen der richtigen Höhe wird der Rücken entlastet.“

(Mojca, Krankenschwester auf der Rheumatologie)

Komfort

Die **weiche Polsterung** und die **Zero Gravity** Position des Therapiestuhls sorgen für einen erstklassigen Komfort für die Patienten während langen Therapie-zeiten. Die Polsterung ist aus **Schaumstoff der Spitzenqualität hergestellt**, welcher den Patienten-körper über die gesamte Liegefläche **komplett unterstützt**, und **verhindert**, dass der Patient **schwitzt oder überhitzt**. Mit einem einzigen Knopfdruck auf die **„Wolke“ Taste** des Handschalters kann der Patient den Stuhl in die Zero G Lage verstellen, die während lang andauernder Therapien zusätzlich den Druck auf den Körper vermindert und die Gelenke entlastet.

Einfach zu installieren

Eine breite Palette an einfachen und intelligenten Funktionen erleichtern dem medizinischen Personal die Arbeit, denn der Patient kann den Stuhl **eigenständig** in die für ihn bequemste Lage **positionieren**. Der Patient kann mit nur einem Druck auf die Taste des Handschalters den Stuhl in die **Zero G-Lage** oder **Sitzlage** stellen, oder aber in **liegeposition** einstellen. In Notfällen kann der Stuhl auch schnell in die **Trendelenburglage** gestellt werden. Alle Stuhlteile können **zeitgleich** verstellt werden. Der Stuhl kann zusätzlich mit einer **Fußstütze** ausgestattet werden, die Patienten bei Krampf-Anfall unterstützen kann. Die Fußstütze kann vollkommen eigenständig per Knopfdruck eingestellt werden. Für noch größeres Wohlbefinden während den Therapien sorgen die **Armstützen**, die von dem Patienten mittels Griff angepasst werden können. Da die Armstützen **äußerst stabil** sind, dienen sie nicht nur der Therapie sondern auch dem Setzen und Aufstehen vom Stuhl.

Einfache Instandhaltung und Reinigung

Der Therapiestuhl ZeroG nimmt wegen seines **kleinen Grundrisses** sehr wenig Raum ein. Die Polsteroberfläche ist einteilig glatt und deshalb **besser und schneller zu reinigen**. Sie ist aus dünnem, **strapazierfähigem PU-Material** hergestellt, beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette und Desinfektionsmittel und **gewährleistet somit die entsprechende Hygiene**.