


## Technische Daten

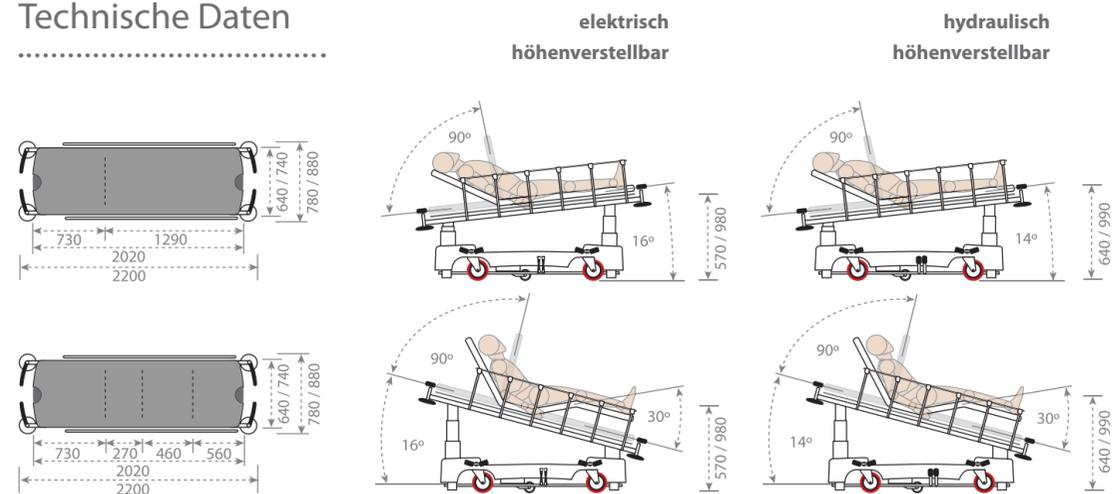

## Ausstattungs- und Zubehörverzeichnis

	STRX-E	STRX-H
zulässige Belastung	260 kg	260 kg
Liegehöhe	57–98 cm	64–99 cm
abgesenkte Höhenverstellung (59–89 cm, Trendelenburg 12°) – LH-X	—	○
rutschfeste Matratze (Stärke 6/8/10 cm) – MAT-6/8/10-X	○	○
Matratze mit seitlichen Griffen (Stärke 6/8/10 cm) – MAT-6H/8H/10H-X	○	○
Seitengitter	●	●
Wandabweiser	●	●
Schiebegriffe	●	●
Klappbarer Schiebegriffe – FPH-X	○	○
Papierrollenhalter – NZP-X	○	○
Infusionsständer – SIF-X	○	○
Sauerstoffflaschenhalter (Länge 45 cm oder 55 cm) – O2-X, O2-X-L	○	○
Normschiene an Liege (Paar) – LE-X	○	○
Normschiene an Kopfteil – LE-X-S	○	○
Normschiene an Fußteil – LE-X-Z	○	○
gummibeschichtete Rollen mit zentralem Blockiersystem (Ø 200 mm)	●	●
fünftes Rad – PK-X	○	○
antistatische Rolle (Stk) – AC-X	○	○
Monitorhalterung – MH-X	○	○
Aufladegerät für Batterie – CHR-X	○	—
zusätzliche Batterie – BAT-X	○	—

Serienmäßig ● Option ○ Nicht lieferbar —



Oberschwabenklinik in Ravensburg, Deutschland

## Notaufnahme



reddot design award  
winner 2017

# STRETCHER X

Weil jede Sekunde zählt!

**Modelle**

Der Patiententransporter ist lieferbar mit **ELEKTRISCHEM** oder **HYDRAULISCHEM** Antrieb und mit **2-TEILIGER** oder **4-TEILIGER LIEGEFLÄCHE**.


**freier Zugang** für klassische Röntgenuntersuchungen oder C-Bogen

kurzer **Radabstand**

ausgezeichnet **lenkbar** und **wendig**

**durchlässig** für Röntgenstrahlen

Liegefläche ist bis zu **95%** röntgenfähig

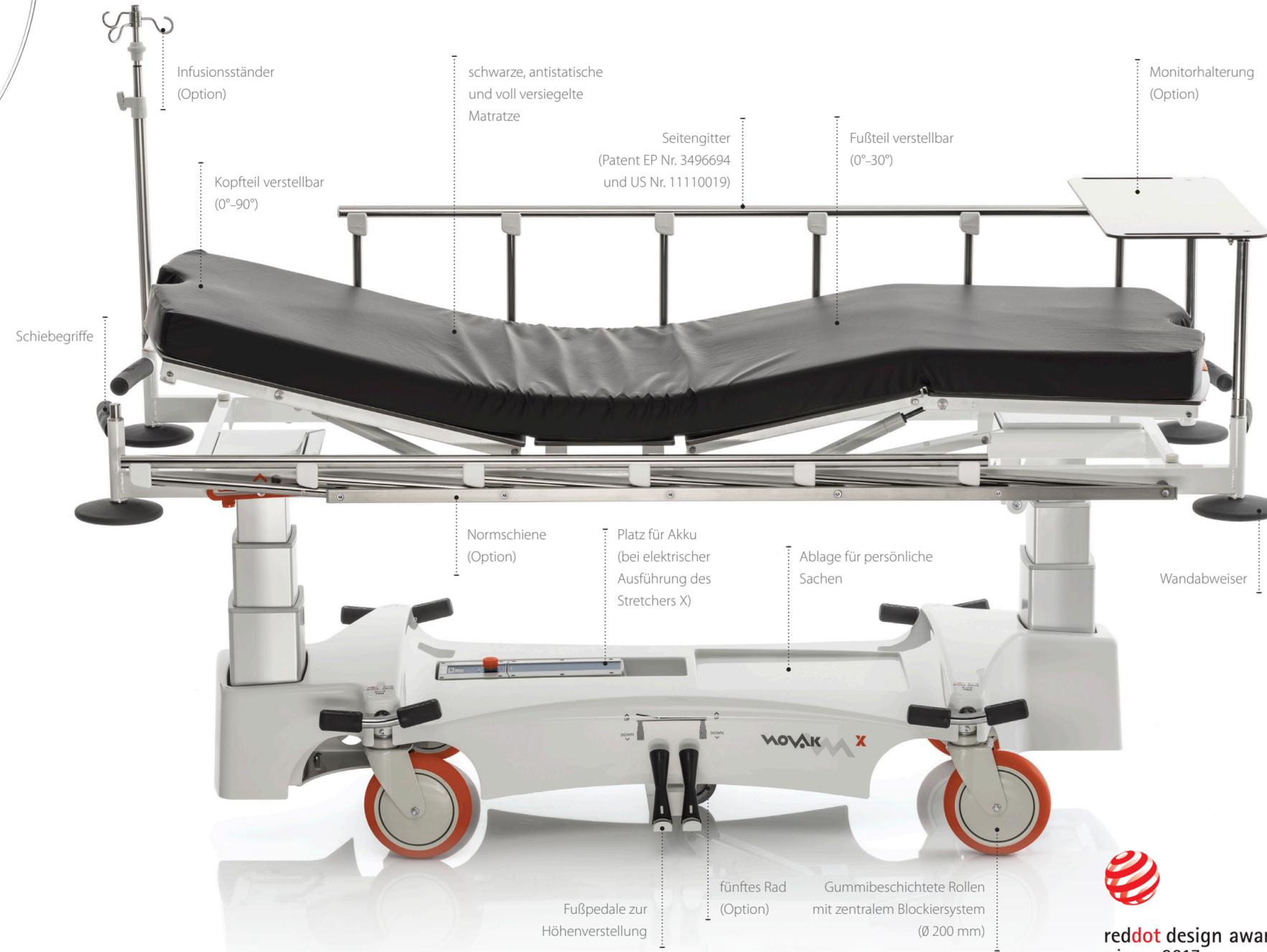

## Optimierter Zugang für Röntgenuntersuchungen

Ein wesentlicher Vorteil des **Stretchers X** liegt in der großen Liegefläche. Diese ist **RÖNTGENFÄHIG** und erlaubt einen optimalen **RÖNTGEN-** oder **C-BOGEN-ZUGANG** von sämtlichen Seiten des Patiententransporters. Dies ermöglicht eine schnellere Versorgung der Notfallpatienten, denn diese müssen während der Untersuchung nicht bewegt werden. Die hervorragende Zugänglichkeit und Röntgentauglichkeit wird durch die **INNOVATIVE DIAGONALFORM DES UNTERBAUS** (EP-Patent Nr. 3377017), erzielt, welche neue Standards in der Entwicklung von Notfallliegen setzt.

## Ausgezeichnet lenkbar und wendig

Der **KURZE RADABSTAND** vereinfacht das Schieben, Wenden und Ausweichen des Patiententransporters bei Hindernissen. An allen Ecken sind **WANDABWEISER**, die das Fahrwerk und die Umgebung vor Beschädigungen schützen. Die **SCHIEBEGRIFFE** sind ergonomisch geformt, was einen zuverlässigen Griff während der Fahrt ermöglicht. Die **GUMMIBESCHICHTETEN ROLLEN MIT ZENTRALEM BLOCKIERSYSTEM** sind von allen Seiten einstellbar und sorgen für eine maximale Haftung und eine optimale Lenkbarkeit. Das System ermöglicht eine freie Drehbarkeit der Rollen, das Fahren in die gewünschte Richtung oder eine Sperre aller Rollen. Optional kann ein **FÜNFTES RAD** gewählt werden, welches das Lenken des Patiententransporters während der Fortbewegung und des Wendens zusätzlich vereinfacht.

## Einfache Bedienung

Der Patiententransporter ist mittels **HYDRAULISCHEN** oder **ELEKTRISCHEN** Fußpedalen **EINFACH HÖHENVERSTELLBAR** und bietet somit auch eine **Trendelenburg und Antitrendelenburg-Lagerung**. Das Kopfteil ist manuell verstellbar und das Modell mit **4-TEILIGER LIEGEFLÄCHE** bietet auch synchrones Einstellen der Fuß- und der Sitzfläche. Das stabile **SEITENGITTER** (Patent EP Nr. 3496694 und US Nr. 11110019) aus rostfreiem Metall bietet einen beidseitigen Schutz des Patienten. Mit der **GROßEN AUSWAHL AN ZUBEHÖR**, können Sie den Patiententransporter zusätzlich weiter ausstatten, damit dieser noch besser an Ihre Bedürfnisse angepasst wird.

## Reinigung und Pflege

Die **MATRATZE** ist in drei unterschiedlichen Stärken verfügbar. Sie besteht aus Memory-Schaum und ist mit schwarzem, antistatischem PU-Material bezogen, das resistent gegenüber Blut, Urin, Fett und Desinfektionsmitteln ist. Um eine **EINWANDFREIE HYGIENE** zu gewährleisten, werden die **NÄHTE VERSCHWEISST UND ABGEKLEBT**, um das Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern. Eine **RUTSCHFESTE MATRATZE** aus rutschfestem Material und Klettverschlüssen an der Unterseite verhindert ein Verrutschen während der Untersuchungen und bei der Lagerung des Patienten auf dem Patiententransporter. Für Untersuchungen, bei denen Sie den Patienten zusammen mit der Matratze bewegen müssen, können Sie die Option mit **SEITLICHEN GRIFFEN** und **GLATTER UNTERFLÄCHE** wählen. Der **UNTERBAU** ist zum leichteren Reinigen und Instandhalten mit einer Abdeckung aus biegsamem **ABS-Kunststoff** mit zusätzlicher **PMMA-Beschichtung** gegen Schrammschäden geschützt.

