

## Einfaches und klares Design


Die **Tagesklinik-Operationsliege S** ist so konzipiert, dass sie Ihnen bei tageschirurgischen Eingriffen maximale Unterstützung bietet. Die Liege ermöglicht dem Chirurgen und seinem Team einen **einfachen Zugang** zum Patienten. Die Liegefläche ist **65 cm breit** und verfügt über ein schmales Kopfteil, das serienmäßig mit einem Nasenschlitz und einem passenden Einsatz ausgestattet ist. Die **Polsterung** ist **8 cm dick** und mit **schwarzem, antistatischem Kunstleder** bezogen. Sie ist auf der Unterseite mit verschweißten und abgeklebten Nähten **versiegelt**, die das Eindringen von Flüssigkeiten ins Innere verhindern. Das macht die Reinigung und die Gewährleistung von Hygienestandards noch einfacher.

## Zuverlässig

Die **vierteilige Liege** mit einer beträchtlichen **zulässigen Belastung von 250 kg** und einer robusten Konstruktion ist ein äußerst zuverlässiges Produkt. Die integrierte Software verhindert, dass die Liege beim Einstellen der Höhe den Boden berührt. In der niedrigsten Position stoppt die Liege knapp über dem Boden. Die Tagesklinik-Op-liege wird mit einem **zusätzlichen Akkubetrieb** geliefert, so dass Sie die Position der Liege auch im Falle eines Stromausfalls einstellen und Ihre Arbeit erledigen können.


## Flexibel

Elektrische Liegen verfügen über einen **Rundumschalter** zur Höhenverstellung. Dies ist bei Operationen von entscheidender Bedeutung, da der Chirurg **die Höhe** unabhängig davon, wo er steht, **einstellen** kann und dabei die **Hände frei** hat. Die beiden mittleren Teile der Liege werden elektrisch betrieben, was die Positionierung Ihrer Patienten erleichtert. Der zusätzliche **Handschalter** ist einfach zu bedienen und verfügt über eine **innovative Speicherfunktion**. Zusätzlich zur vollständig flachen Position können Sie zwei beliebige bevorzugte Positionen speichern. Kopf- und Beinteil werden von Gasfedern getragen und sind manuell verstellbar. Die Liege ist standardmäßig mit **Normschienen** und **Armstützen** ausgestattet, die leicht verstellbar sind.


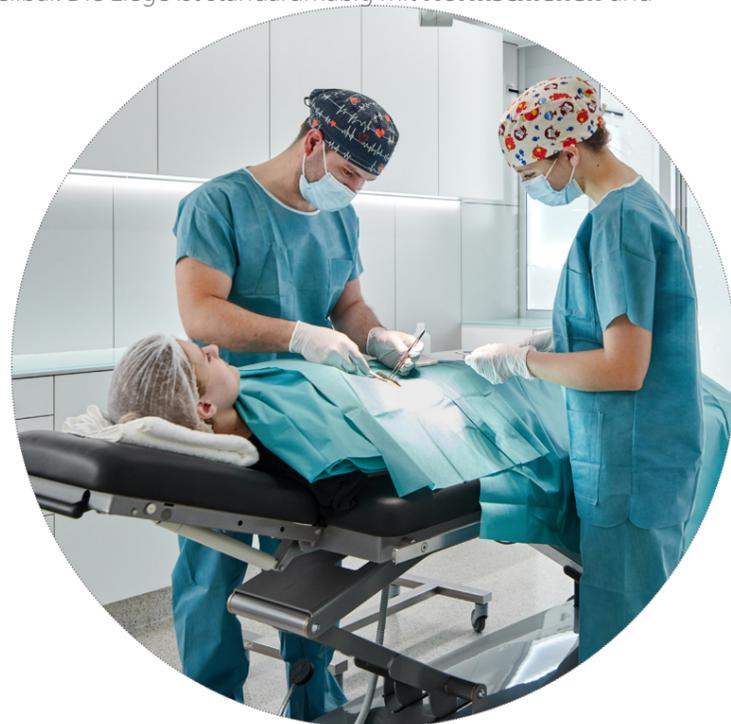


## Ambulante Operationen



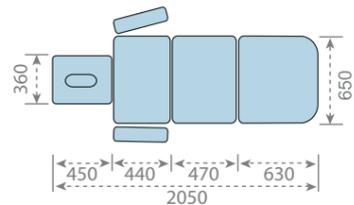

# TAGESKLINIK- OPERATIONSLIEGE S

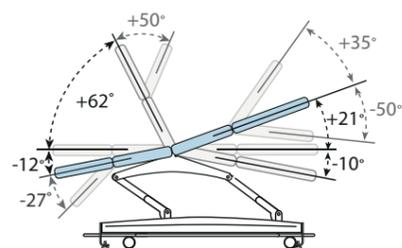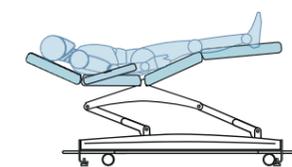 Modell: **ETSOP-65**


POSITIONEN

**Schmales Kopfteil**

- mit Öffnung und Einsatz
- manuell verstellbares

**Armstützen**

- Höhe und Neigung verstellbar
- an der Normschiene befestigt


**Handschalter**

- für die Einstellung der Höhe, des Rücken- und Sitzteils
- mit innovativer Speicherfunktion

**Schwarte antistatische Polsterung**

- Liegebreite 65 cm
- 8 cm dicke Polsterung mit Memory-Schaum
- nahtlos und vollständig versiegelt
- breitere Liegefläche durch die rechtwinklig verarbeitete Polsterung

**Normschiene**

- standard am Rücken- und Sitzteil

**Liegenunterbau**

- die ABS-Kunststoffabdeckung ist zur leichteren Reinigung schraubenlos
- erhöhte Stabilität durch standardmäßige 250 kg zulässige Belastung

**Sanft einziehbares Rollensystem**

- antistatische Rollen
- enthält Stoßdämpfer, um die Rollen sanft abzusinken

**Rundumschalter**

- einfache Höhenverstellung von allen Seiten der Liege möglich

**Akkubetrieb**

- integrierte Notstromversorgung für den Fall eines Stromausfalls

**Ausstattungs- und Zubehörverzeichnis**

	ETSOP-65
zulässige Belastung 250 kg	●
elektrische Höhenverstellung mit Rundumschalter	●
antistatische, nahtlose versiegelte Polsterung mit Memory-Schaum (8 cm)	●
Handschalter für die Einstellung der Höhe, des Rücken- und Sitzteils	●
integrierte Notstromversorgung über Akkubetrieb	●
Normschiene am Rücken- und Sitzteil (Paar)	●
verstellbare Armstützen, an der Normschiene befestigt	●
einziehbare Antistatik-Rollen mit sanfter Freigabe (Ø 75 mm)	●
Potentialausgleich-Steckverbinder – PPEQ	○
Sicherheits-Sperrbox – EVV-S	○

Serienmäßig ● Option ○