


# Technische Daten

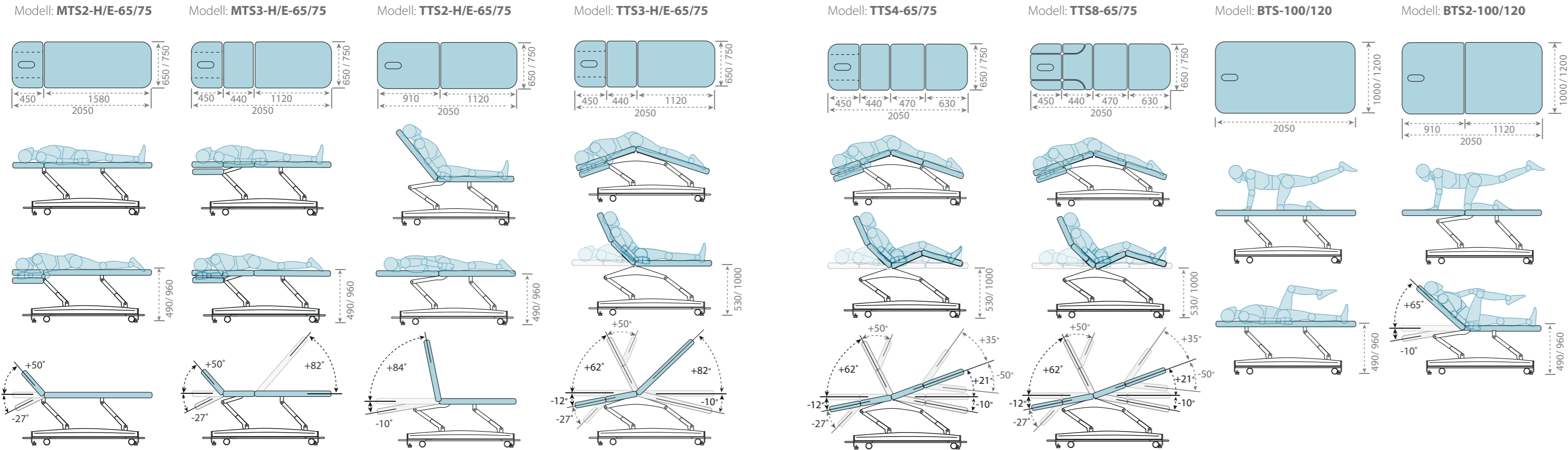

## Massage und Physiotherapie Behandlung

### Ausstattungs- und Zubehörverzeichnis

Serienmäßig ● Option ○

	MTS2-E	MTS2-H	MTS3-E	MTS3-H	TTS2-E	TTS2-H	TTS3-E	TTS3-H	TTS4	TTS8	BTS	BTS2
strapazierfähige Polsterung aus weichem Schaumstoff (8 cm) – SER-SFU8-S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
strapazierfähige Polsterung aus festem Schaumstoff (8 cm) – FFU8-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nasenschlitz mit verschweißten und abgeklebten Nähten (Einsatz inklusive)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
synchron verstellbarer 3-teiliger Kopfteil – TVL-S	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	/	/
Papierrollenhalter am Kopfteil (Nicht in Kombination mit TVL-S möglich) – NZP1-S	○	○	○	○	○	○	○	○	/	/	/	/
Papierrollenhalter am Untergestell – NZP2-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	/	/
PVC-Schutzüberzug für Fußteil – PVC8-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
einziehbare Rollen mit sanfter Freigabe (Ø 75 mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Handschalter	/	/	/	/	/	/	/	/	●	●	●	●
Rundumschalter	●	/	●	/	●	/	●	/	●	●	/	/
Sicherheits-Sperbox – EVV-S	○	/	○	/	○	/	○	/	○	○	○	○
Akkubetrieb – BB-S	○	/	○	/	○	/	○	/	○	○	○	○
Potentialausgleich-Steckverbinder – PPEQ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
zulässige Belastung 250 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



reddot winner 2020

# MASSAGE- UND THERAPIELIEGEN S

Wir legen Wert darauf, dass die Behandlungsliege die spezifischen Anforderungen Ihrer Praxis erfüllt. Nutzen Sie unseren **ONLINE-KONFIGURATOR** und statten Sie Ihre Liege so aus, dass sie Ihre täglichen Aufgaben perfekt unterstützt und Ihren Patienten sowohl Sicherheit als auch maximalen Komfort bietet.



KONFIGURIEREN



**Kopfteil**

- Nasenschlitz mit Memory-Schaum und passendem Einsatz
- verschweißte und abgeklebte Nähte um den Nasenschlitz verhindern das Eindringen von Massageölen und Lotionen
- ungehinderter Zugang des Therapeuten unterhalb des 3-teiligen Kopfteil
- ein einhändiger Druck nach oben oder unten verstellt beide Armlehnen gleichzeitig

**Polsterung**

- strapazierfähige und nahtlose
- 8 cm dicke weiche oder feste Polsterung aus zweilagigem Schaumstoff
- breitere Liegefläche durch die rechtwinklig verarbeitete Polsterung

**Der Handschalter** enthält eine CPR-Taste für die vollständig flache Position, eine SOS-Taste für die Trendelenburg-Position und eine **Speicherfunktion** zum Speichern einer Position nach Wahl des Behandlers.



**Stärkere Steuereinheit**

- neue Software ermöglicht die synchrone Bewegung der beiden mittleren Teile der Liege
- bei Bedarf leichter austauschbar

**Liegenunterbau**

- die ABS-Kunststoffabdeckung ist zur leichteren Reinigung schraubenlos
- standardmäßige 250 kg zulässige Belastung

**Sanft einziehbares Rollensystem**

- enthält Stoßdämpfer, um die Rollen sanft abzusenken

**Rundumschalter**

- einfache Höhenverstellung von allen Seiten der Liege möglich

## So wird die Reinigung einfacher

Um eine **einfache Reinigung** und **hohe Hygienestandards** zu gewährleisten, ist die **POLSTERBEZUG** ohne **NÄHTE** und aus hochwertigem **BIOKOMPATIBLEM** Kunstleder gefertigt. **NÄHTE** um den Nasenschlitz sind **GESCHWEISST** und **ABGEKLEBT**, um das **Eindringen** von **Flüssigkeiten, Massagelotionen** und insbesondere **Ölen** zu **verhindern**. Die **ABS-KUNSTSTOFFABDECKUNG**, die den Liegenunterbau schützt, ist **schraubenlos** und dadurch **völlig glatt**. Die **VERSTELLHEBEL** für Kopf- und Beinteile mit ihrem im Rahmen integrierten Mechanismus sind **leichter zu betätigen** und **reinigen**.

## Maximaler Komfort und einfache Bedienung

Um den Patientenkomfort zu maximieren, ist die **8 cm dicke POLSTERUNG** aus **zweilagigem Schaumstoff hergestellt**. Sie ist **strapazierfähig und komfortabel** auf der gesamten Liegefläche, die dank der **rechtwinklig verarbeiteten** Polsterung jetzt noch **breiter** ist. Um die Behandlungen voll zu unterstützen, können Sie zwischen einer **weichen** und einer **festen** Schaumstoffpolsterung wählen, die in mehr als 30 Farben erhältlich ist. Der **NASENSCHLITZ** sorgt mit **Memory-Schaum** an den Rändern für perfekten Komfort in Bauchlage. Ein **passender EINSATZ** gehört ebenfalls zum Standard. Optional kann die Liege mit einem **DREITEILIGEN KOPFTEIL** ausgestattet werden welches dem am Kopfteil sitzenden Therapeuten während der Behandlung des Patienten einen **ungehinderten Zugang** ermöglicht. Mit dem **NEUEN MECHANISMUS** zur Armlehnenverstellung genügt ein **einhändiges Drücken**, um beide Armlehnen gleichzeitig abzusenken oder anzuheben.

Sie können zwischen **ELEKTRISCH** oder **HYDRAULISCH VERSTELLBAREN** Massage- und Therapieliegen wählen. Die einfache Höhenverstellung ermöglicht den Patienten ein **leichtes Niederlassen** und schafft eine **bequeme Arbeitshöhe** für die Behandelnden. Indem Sie den **RUNDUMSCHALTER** nach **oben** oder **unten** drücken, können Sie elektrische Liegen völlig mühelos **von allen vier Seiten absenken** oder **erhöhen**. Die Höhe der hydraulischen Liegen kann durch Betätigung des **FUSSPEDALS** an zwei Seiten der Liege eingestellt werden. Der **HANDSCHALTER** enthält auch zwei Tasten für die **vorgespeicherte vollständig flache** und **Trendelenburg-Position** und eine **Speicherfunktion** zum Speichern einer Position nach Wahl des Behandlers.

Die standardmäßige **ZULÄSSIGE BELASTUNG** wurde auf **250 kg** erhöht, was zur **perfekten Stabilität** beiträgt. Auch bei starker Druckausübung während der Behandlung können sich die Therapeuten auf die Liege verlassen. Dank der **NEUEN SOFTWARE**, die die **synchrone Bewegung** der beiden mittleren Liegenteile ermöglicht, können sie ihre **Patienten einfacher** und **schneller positionieren**. Die Liege steht fest auf ihren **GUMMIFÜSSEN**. Um die Liege im Raum zu bewegen, gibt es **EINZIEHBARE ROLLEN**. Durch den **Stoßdämpfer** erfolgt ein sanftes Absenken oder Einziehen der Rollen.

## Für verschiedene Behandlungen, Massagen und Therapien

Ein **NASENSCHLITZ** mit **PASSENDEN EINSATZ** und eine **ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG** gehören jetzt zur Serienausstattung der erneuerten S-Line unserer Massage- und Therapieliegen. Zwei Modelle der Massageliegen bieten eine breite und **komfortable Liegefläche** für Massagen und Therapien. Wenn Behandlungen Positionen mit negativer Neigung erfordern, um die **Jackknife-** oder die **Trendelenburg-Position** zu ermöglichen, sind 3-, 4- und 8-teilige Therapieliegenmodelle verfügbar. Die **voll ausgestattete** Therapieliege S8 verfügt standardmäßig über ein **DREITEILIGES KOPFTEIL** und **STABILE KLAPPBARE SEITENFLÜGEL**, die in das Rückenteil integriert sind. Die Bobathliege bietet eine zusätzliche **breite Oberfläche** für Rehabilitationsbehandlungen. Jetzt verfügen sowohl das ein- als auch das zweiteilige Modell der Bobathliege über einen **HANDSCHALTER** zur Verstellung der Höhe sowie auch des Kopfteils.