

## Erhöhte Sicherheit und mehr Komfort für die Patienten

Bei der Entwicklung des Patiententransporters Stretcher X2 stand der Patient im Mittelpunkt der Überlegungen, um die **Sicherheit und den Komfort für die Patienten** zu verbessern. Die außergewöhnlich **niedrige Aufstieghöhe von 52 cm** (+Matratze) ermöglicht ein einfaches Auf- und Absteigen, was vor allem für ältere Patienten von Vorteil ist. Die **Seitengitter** aus Edelstahl verfügen über eine patentierte Lösung, wodurch sie noch stabiler und leichter zu reinigen sind. Die erstrecken sich fast über die gesamte Länge des Patiententransporters, um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten. Verschiedene **Matratzenoptionen** ermöglichen es Ihnen, Ihren Patienten während der Zeit, die sie auf dem Patiententransporter verbringen, maximale Unterstützung und Komfort zu bieten.

## Flexibel und zuverlässig

Die neue Generation des Patiententransporters X verbessert den Patientenfluss im Krankenhaus und ermöglicht es dem Pflegepersonal, seine Aufgaben noch einfacher und effizienter zu erledigen. Die Höhenverstellung erfolgt **hydraulisch**, mit Fußpedalen auf beiden Seiten des Patiententransporters. Um in kritischen Situationen schnell handeln zu können, können Sie die **Anti-Trendelenburg-Lagerung** des Patiententransportwagens **freihändig** und nur mit Hilfe der Fußpedale einstellen. Zur Unterstützung von Patienten mit Atem- oder Herzproblemen oder einfach nur, um es ihnen bequemer zu machen, kann das **Kopfteil bis auf 85° angehoben** werden. Bei einem vierteiligen Patiententransporter kann das **Beinteil bis zu 27° angehoben werden, mit einer Kniewinkelung von -5°**, was zu höherem Komfort beiträgt und die Durchblutung verbessert. Da die Teile des Patiententransporters durch Gasfedern gestützt werden, ist für ihre Einstellung nur ein geringer Kraftaufwand erforderlich. Die Abdeckung des Unterbaus aus ABS-Kunststoff bietet **Platz für die persönlichen Dinge des Patienten**. Ein **kleineres Ablagefach unter dem Kopfteil** für Akten, ein Tablet oder ein Überwachungsgerät ist als optionales Zubehör erhältlich.

## Reibungsloser Transport und perfekte Steuerung

Der Patiententransporter Stretcher X2 ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, die dem Personal das Manövrieren und die Handhabung erleichtern. Der Stretcher X2 ist **18 kg leichter als die vorherige X-Generation** und gleichzeitig außergewöhnlich **stabil** mit einer **zulässigen Belastung von 320 kg**. Vier große Gummirollen gehören zur Standardausstattung, darunter eine antistatische Richtungsrolle. Mit dem **optionalen fünften Rad** wird das Manövrieren des Patiententransporters und das Wenden auf der Stelle zum Kinderspiel, auch wenn Sie ihn allein bewegen müssen. Das zentrale Blockiersystem wird standardmäßig über **Fußschalter am Kopf- und Fußende** bedient. Als Sonderausstattung sind **vier seitliche Fußschalter** erhältlich, die eine noch größere Flexibilität ermöglichen. An beiden Enden des Patiententransportwagens befinden sich **Schiebegriffe**, die einen sicheren und festen Halt gewährleisten. Die optionalen **klappbaren Schiebegriffe** lassen sich schnell absenken, damit Sie Ihre Patienten leichter erreichen und besser versorgen können. **Wandabweiser** an allen vier Ecken schützen den Patiententransporter vor versehentlicher Beschädigung.



[in](#) [f](#) Bring treatment to a higher level!


Novak M d.o.o., Pod smrekami 5, SI - 1218 Komenda  
E: info@novak-m.si // T: +386 1 5620117 // [www.novak-m.com](http://www.novak-m.com)



## Stretcher X2



reddot winner 2022  
medical devices and technology


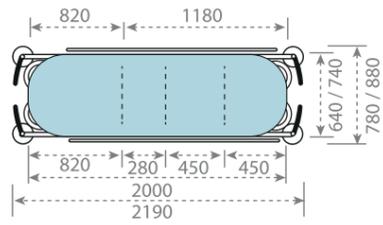


# STRETCHER X2 - hydraulic

Modellen:

**STRX2-H2** (2-teiliger Patiententransporter)

**STRX2-H4** (4-teiliger Patiententransporter)

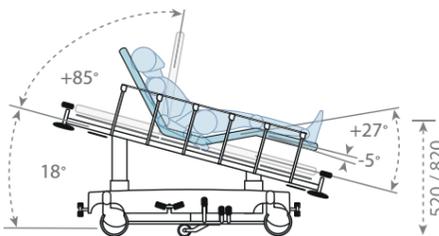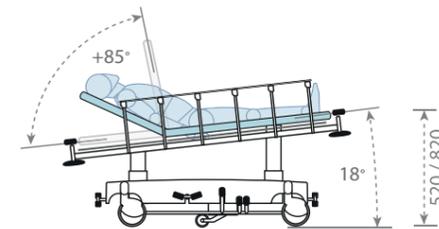

POSITIONEN

**Bildschirmplatz**  
- optional unter dem Kopfteil  
- 6,5 l Platz für Dokumente, Tablet oder andere Geräte

**Infusionsständer**

- optional
- höhenverstellbar
- Easy-Click-System an allen vier Ecken

**Antistatische Matratze**

- Rutschfeste Matratze mit Klettverschluss oder Transfermatratze mit Griffen
- für perfekte Unterstützung und Komfort des Patienten: responsive (6 cm), comfort (8 cm) und extra comfort (10 cm)

**Einfache Positionierung**

- einfache manuelle Einstellung der Liegenteile durch Gasfedern
- einfache Einstellung des Kopfteils bis zu 85°
- 4-teiliger Patiententransporter: Einstellung des Beinteils bis zu 27° mit Kniewinkel -5°

**Schiebegriffe**

- fester und ergonomischer Griff
- am Fuß- und Kopfende
- optional klappbare Schiebegriffe in zwei verschiedenen Höhen

**Seitengitter**

- klappbar, fest und stabil
- Patente EP 3496694 und US 11110019

**Unterbau**

- zulässige Belastung 320 kg
- Stauraum für persönliche Dinge des Patienten (13,5 l) in der Abdeckung integriert
- geeignet für Neigungen bis zu 5° (Höhenunterschied von 78 mm auf 1 m)

**Hydraulisch höhenverstellung**

- zwischen 52 und 82 cm durch Fußpedale auf beiden Seiten
- niedrige Minimalhöhe zum einfachen Auf- und Absteigen
- Anti/Trendelenburg-Position -18°, über Fußpedale einstellbar

**Zentral blockierbare Rollen**

- Bedienelemente am Kopf- und Fußende standardmäßig, vierseitige Bedienelemente optional
- direktionale antistatische Rolle standardmäßig
- fünfte Rolle optional



KONFIGURIEREN

Ausstattungs- und Zubehörverzeichnis	STRX2-H2	STRX2-H4
zulässige Belastung 320 kg	●	●
hydraulische Höhenverstellung (52-82 cm)	●	●
integrierte Ablagemöglichkeit für persönliche Gegenstände des Patienten auf der Abdeckung des Liegenunterbaus (13,5 l)	●	●
abklappbare Seitengitter	●	●
zentrales Blockiersystem mit Betätigung am Kopf- und Fußende – SER-2CK-X2	●	●
zentrales Blockiersystem mit vierseitiger Betätigung – 4CK-X2	○	○
Schiebegriffe an Kopfteil und Fußteil – SER-PH-X2-S, SER-PH-X2-Z	●	●
klappbarer Schiebegriffe – FPH-X2-S, FPH-X2-Z	○	○
direktionale antistatische Rolle, Ø 200mm – SER-SK-X2	●	●
fünfte Rolle, Ø 100 mm (1 Stk) und zusätzliche antistatische Rolle Ø 200 mm (1 Stk) – PK-X2	○	○
Normschiene am Liege, an Kopfteil und Fußteil – LE-X2, LE-X2-S, LE-X2-Z	○	○
Papierrollenhalter – NZP-X2	○	○
Infusionsständer (1 Stk) – SIF-X	○	○
Sauerstoffflaschenhalterung – O2-X2 (45 cm), O2-X2-L (55 cm)	○	○
antistatische Rolle (1 Stk) – AC-X2	○	○
Ablage für persönliche Gegenstände oder Monitore unter dem Kopfteil (6,5 l) – POM-X2	○	○
Transfermatratze responsive (6 cm) – MAT-6H-X2	○	○
Transfermatratze comfort (8 cm) – MAT-8H-X2	○	○
Transfermatratze extra comfort (10 cm) – MAT-10H-X2	○	○
Rutschfeste Matratze responsive (6 cm) – MAT-6-X2	○	○
Rutschfeste Matratze comfort (8 cm) – MAT-8-X2	○	○
Rutschfeste Matratze extra comfort (10 cm) – MAT-10-X2	○	○
ESD-Schleppkette – STE-X2	○	○
Potentialausgleich-Steckverbinder – PPEQ	○	○

Serienmäßig ● Option ○