



MPO Verbandwagen



Medikamentenversorgung



MPO Anästhesiewagen



Pflegewagen mit Schubladen



Medikamentenwagen mit Rollladen



Pflegewagen mit herausnehmbaren Modulkörben

# Mit System zur optimalen Lösung.

Die Anforderungen an Pflege-, Stations- oder Visitenwagen im Gesundheitswesen sind vielfältig. Um für jeden Einsatzbereich optimal ausgestattet zu sein, können die modularen Pflege- und Organisationswagen von ZARGES exakt an individuelle Wünsche und Anforderungen angepasst werden. Ein Baukasten-System von wenigen Grundkomponenten ermöglicht dabei zahlreiche Varianten, die sowohl in Sachen

Funktionalität als auch beim Design für spezielle Bedürfnisse und Ansprüche konfiguriert werden können. Dank ihrer uneingeschränkten Mobilität sind sämtliche MPO-Modelle noch dazu jederzeit und flexibel einsetzbar – sei es als Pflegewagen, Medikamentenwagen oder als mobile EDV-Arbeitsstation.



**1 Arbeitsplatten-Varianten.** ABS-Kunststoff mit und ohne Galerie und HPL-Vollkunststoff. **2 Schiebegriff.** Aluminium-Guss, kunststoffbeschichtet, für komfortables Handling, leicht zu reinigen. **3 Seitenwand.** Wahlweise mit farbigem Mittelsegment. **4 Abweiser.** Abriebfeste, desinfektionsmittelbeständige Kunststoffpolsterung. **5 Rollen.** Kunststoff-Doppelrollen, Optional mit Abweiser, 4 Präzisionslenkrollen,  $\varnothing$  125 mm, davon 2 Radfeststeller für maximale Beweglichkeit auf engstem Raum. **6 Eckprofile.** Aus eloxiertem Aluminium. **7 Wagenboden.** Aus stabiler Kunststoffplatte. **8 Schubladengriff.** Aluminium-Guss, kunststoffbeschichtet, für komfortables Handling, leicht zu reinigen, optional mit Farberkennung.

## Standard-Modelle.



### Schubladen

Geeignet für ZARGES ISO-Module, gelagert auf Teleskopschienen.



### Rollladen mit Trägerwand

Geeignet für ZARGES ISO-Module und Modulschubladen, gelagert auf Kunststoffträgerwand, platzsparendes Öffnen.



### Rollladen mit variablen Teleskopschienen

Geeignet für ZARGES ISO-Module und Modulschubladen, gelagert auf Teleskopschienen mit Softclose.



### Offen mit Modulschubladen

Gelagert auf Teleskopschienen und herausnehmbar.

# Standard-Größen.

## Arbeitshöhen



Arbeitshöhe ca. 900 mm = 58 HE



Arbeitshöhe ca. 1.000 mm = 66 HE



Arbeitshöhe ca. 1.100 mm = 74 HE

1 HE = 12,5 mm, mit HE wird die Nutzhöhe angegeben.

## ISO-Breiten



### 0,5 ISO

- ▶ Einschubbreite für ISO-Halbmodule: 400 × 300 mm.
- ▶ Abmessungen: (B × T) ca. 520 × 595 mm.



### 1 ISO

- ▶ Einschubbreite für ISO-Module: 600 × 400 mm.
- ▶ Abmessungen: (B × T) ca. 720 × 595 mm.



### 2 ISO

- ▶ Einschubbreite für ISO-Module: 600 × 400 mm.
- ▶ Abmessungen: (B × T) ca. 1.345 × 595 mm.

# Schubladeneinteilung und Rollläden.



## MPO Standard-Schubladen

	Schubladenhöhe	Passend für ISO-Module
8 HE	100 mm	ISO-Modul 600 × 400 × 50 mm
10 HE	125 mm	ISO-Modul 600 × 400 × 50 mm ISO-Modul 600 × 400 × 100 mm
12 HE	150 mm	ISO-Modul 600 × 400 × 100 mm
20 HE	250 mm	ISO-Modul 600 × 400 × 200 mm
26 HE	325 mm	ISO-Modul 600 × 400 × 200 mm Hängeregister

Schubladen in 0,5 und 1 ISO erhältlich.

1 HE entspricht 12,5 mm

Tastaturauszug mit 8 HE für 0,5 und 1 ISO erhältlich



## MPO Standard-Rollläden

Höhe, mm	Breite 400 mm, Bestell-Nr.	Breite 600 mm, Bestell-Nr.
900	31001872	31001871
1.000	31001873	31001261
1.100	31001875	31001874

# Optionen – Individualität ist unsere Stärke.

Neben zahlreichen erprobten Standard-Modellen haben Sie die Möglichkeit, alle Pflege- und Organisationswagen Ihren täglichen Bedürfnissen entsprechend zu konfigurieren. Dies beginnt bei der Auswahl von Schubladenblenden oder Rollläden bis hin zu Trägersystemen für die Einschübe.

Die Trägersysteme können an Ihre speziellen Anforderungen angepasst, die Arbeitsplatten in Material und Funktion unterschiedlich kombiniert werden. Gerne beraten wir Sie bei der Zusammenstellung.

## Arbeitsplatten



### Kunststoff ABS mit Galerie

- ▶ Werkzeuglos abnehmbar.
- ▶ Erhältlich nur für 1 ISO.



### Kunststoff ABS ohne Galerie

- ▶ Werkzeuglos abnehmbar.
- ▶ Erhältlich nur für 1 ISO.



### Kunststoff HPL ohne Galerie

- ▶ Fest montiert.
- ▶ Erhältlich für 1,2 und 0,5 ISO.

## Schließsysteme



### Zylinderschloss

- ▶ Gleichschließend.
- ▶ Erhältlich für Schubladen und Rollläden.
- ▶ Optional verschiedenschließend.



### Digitalschloss

- ▶ Veränderbarer Zahlencode.
- ▶ Erhältlich für Rollläden.



### Kartenschloss

- ▶ Erhältlich für Schubladen und Rollläden.
- ▶ Individuelle Programmierung.

# Farbauswahl MPO Funktionswagen.

## Individuelle Farbgestaltung durch farbige Schubladengriffe



Standard-Farbausführung: Frontblenden und Seitenwände in Weiß, Schubladengriffe in Weißaluminium.




RAL 9006,  
Weißaluminium



RAL 240 70 30,  
Blau



RAL 140 60 50,  
Grün

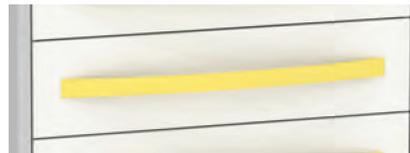

RAL 095 80 80,  
Gelb



RAL 030 40 60,  
Rot

## Optionale Farbgebung durch zusätzliche farbige Seitenwände



RAL 9016,  
Verkehrsweiß



RAL 240 70 30,  
Blau



RAL 140 60 50,  
Grün



RAL 095 80 80,  
Gelb



RAL 030 40 60,  
Rot

# Professionelle Helfer: MPO Pflegewagen für alle Aufgaben auf den Stationen.

Der zuverlässige Begleiter bei allen Arbeitsschritten ermöglicht eine übersichtliche Lagerung für alle Ver- und Gebrauchsgüter. Alle Zubehörteile sind separat zu entnehmen und leicht zu reinigen.





### MPO Pflegewagen mit Schubladen Typ 1

- ▶ Ausgestattet mit Schubladen zur Aufnahme von Modulen und Modulkörben in 50/100/200 mm Höhe.
- ▶ Schubladen gelagert auf Teleskopauszügen mit Softeinzug.
- ▶ Optional mit Auszugssperre.



### MPO Pflegewagen mit Rollladen Typ 2

- ▶ Platzsparendes Öffnen durch Rollladen, leichte Zugriffsmöglichkeiten.
- ▶ Innenausstattung: variabel zu bestücken mit ZARGES Modulen auf Trägerwänden oder Teleskopschienen.



### MPO Pflegewagen Typ 3

- ▶ Ausgestattet mit Modulschubladen.
- ▶ Modulschubladen gelagert auf Trägerwand.
- ▶ Frontseite offen.



### MPO Pflegewagen Typ 4

- ▶ Ausgestattet mit Modulschubladen und Medikamentenmodule
- ▶ Schubladen und Module gelagert auf Trägerwand.
- ▶ Platzsparendes Öffnen mit Rollladen, abschließbar mit Digitalschloß.

### Erhältlich für alle Varianten

- ▶ Standardfarbe: Weißaluminium, individuelle Farbgestaltung durch farbige Schubladengriffe und mittleres Element bei Seiten- und Rückwand.
- ▶ Verschiedene Höhen lieferbar.
- ▶ Frei wählbares Zubehör aus der Zubehörliste ab Seite 104.

# Funktion und Design perfekt dosiert: MPO Medikamentenwagen.

Durch die variable und praxisgerechte Innenausstattung erlaubt der Medikamentenwagen den sicheren Transport bei der patientenbezogenen Verteilung der täglichen Medikation.





### MPO Medikamentenwagen Typ 1

- ▶ MPO Funktionswagen für Medikamentenverteiltabrett.
- ▶ Variabel zu bestücken mit ZARGES Modulen und Medikamententabrett auf Trägerwänden.
- ▶ Rollladen, abschließbar mit Digitalschloss.
- ▶ Schwenkarm für Laptop, höhenverstellbar.
- ▶ Seitlich klappbare Arbeitsplatte.



### MPO Medikamentenwagen Typ 2

- ▶ Variabel zu bestücken mit ZARGES Modulen.
- ▶ Rollladen, abschließbar mit Digitalschloss.
- ▶ Schwenkarm für Laptop, höhenverstellbar.
- ▶ Seitlich klappbare Arbeitsplatte.



### MPO Medikamentenwagen Typ 3

- ▶ Ausgestattet mit Schubladen zur Aufnahme von Modulen und Modulkörben in 50/100/200 mm Höhe und passenden ZIP-Boxen.
- ▶ Schubladen gelagert auf Teleskopauszügen mit Softeinzug.
- ▶ Optional mit Auszugssperre.



### MPO Medikamentenwagen Typ 4

- ▶ Ausgestattet mit einer abschließbaren Schublade.
- ▶ Variabel zu bestücken mit ZARGES Modulen.
- ▶ ZARGES-Modulen gelagert auf Trägerwand.

### Erhältlich für alle Varianten

- ▶ Standardfarbe: Weißaluminium, individuelle Farbgestaltung durch farbige Schubladengriffe und mittleres Element bei Seiten- und Rückwand.
- ▶ Verschiedene Höhen lieferbar.
- ▶ Frei wählbares Zubehör aus der Zubehörliste ab Seite 104.

# Alles im Blick, alles zur Hand: MPO Anästhesiewagen.

In der Anästhesie ist es unerlässlich, alle benötigten Hilfsmittel schnell zur Hand zu haben. Dank der flexiblen Innenausstattung des MPO Anästhesiewagens lassen sich diese übersichtlich und platzsparend anbringen.





### MPO Anästhesiewagen Typ 1

- ▶ Ausgestattet mit Modulschubladen.
- ▶ Modulschubladen gelagert auf Trägerwand.
- ▶ Frontseite offen.



### MPO Anästhesiewagen Typ 2

- ▶ Ausgestattet mit Schubladen zur Aufnahme von Modulen und Modulkörben in 50/100/200 mm Höhe.
- ▶ Schubladen gelagert auf Teleskopschienen mit Softeinzug.
- ▶ Optional mit Auszugssperre.



### MPO Anästhesiewagen Typ 3

- ▶ Ausgestattet mit Schubladen zur Aufnahme von Modulen und Modulkörben in 50/100/200 mm Höhe.
- ▶ Schubladen gelagert auf Teleskopschienen mit Softeinzug.

### Erhältlich für alle Varianten

- ▶ Standardfarbe: Weißaluminium, individuelle Farbgestaltung durch farbige Schubladengriffe und mittleres Element bei Seiten- und Rückwand.
- ▶ Verschiedene Höhen lieferbar.
- ▶ Frei wählbares Zubehör aus der Zubehörliste ab Seite 104.

# Wenn jeder Griff sitzen muss: MPO Notfallwagen.

Durch eine variable Innenausstattung und das übersichtliche und platzsparende Anbringen aller für einen Notfallwagen benötigten Komponenten wird dieser Wagen allen Anforderungen gerecht.





### MPO Notfallwagen Typ 1

- ▶ Ausgestattet mit Schubladen zur Aufnahme von ISO-Norm-Modulen, variabel für Module und Modulkörbe in 50/100/200 mm Höhe.
- ▶ Schubladen gelagert auf Teleskopauszügen mit Softeinzug.
- ▶ Schwenkarm für Defibrillatoren, höhenverstellbar.
- ▶ Standardfarbe: Weißaluminium, Farbgestaltung durch farbige Schubladengriffe in Rot RAL 030 40 60.
- ▶ Verschiedene Höhen lieferbar.
- ▶ Frei wählbares Zubehör aus der Zubehörliste ab Seite 104.



### MPO Notfallwagen Typ 2

- ▶ Ausgestattet mit Schubladen zur Aufnahme von ISO-Norm-Modulen, variabel für Module und Modulkörbe in 50/100/200 mm Höhe.
- ▶ Schubladen gelagert auf Teleskopauszügen mit Softeinzug.
- ▶ Bügelaufbau zur Montage von diversem Zubehör.
- ▶ Standardfarbe: Weißaluminium, Farbgestaltung durch farbige Schubladengriffe in Rot RAL 030 40 60.
- ▶ Verschiedene Höhen lieferbar.
- ▶ Frei wählbares Zubehör aus der Zubehörliste ab Seite 104.



Reanimationsbrett (Rückseite)

### Grundausrüstung Notfallwagen

- ▶ Infusionshalter.
- ▶ Schubladenplombierung.
- ▶ Sauerstoffflaschenhalterung.
- ▶ Reanimationsbrett an der Rückwand des Wagens.
- ▶ Farbe: Rot RAL 030 40 60.

# Modular und vielseitig: MPO Verbandswagen

Mit den MPO Verbandswagen sind Sie optimal für jeden Einsatz ausgestattet. Ob für Verbandarbeiten oder zum Einsatz als Universal-Wagen: Die MPO-Modelle bieten durch ihre kompakte Größe bestmögliche Wendigkeit und perfekten Platz.





### MPO Verbandwagen Typ 1

- ▶ MPO 0,5 ISO Funktionswagen.
- ▶ Ausgestattet mit Schubladen für Halbmodule in 50/100 mm, separat ausziehbar, mit Softeinzug.
- ▶ Schubladen gelagert auf Teleskopauszügen mit Softeinzug.
- ▶ Optional mit Auszugssperre.
- ▶ Bügelaufbau zur Montage von diverserem Zubehör.
- ▶ Standardfarbe: Weißaluminium, individuelle Farbgestaltung durch farbige Schubladengriffe.
- ▶ Als Sonderausführung mittleres Element wahlweise in anderem Farbdesign möglich.
- ▶ Verschiedene Höhen lieferbar.
- ▶ Frei wählbares Zubehör aus der Zubehörliste ab Seite 104.



### MPO Verbandwagen Typ 2

- ▶ MPO 0,5 ISO Funktionswagen.
- ▶ Ausgestattet mit Schubladen für Halbmodule in 50/100 mm, separat ausziehbar, mit Softeinzug.
- ▶ Schubladen gelagert auf Teleskopauszügen mit Softeinzug.
- ▶ Eckpfosten zum Aufstecken von Zubehör.
- ▶ Optional mit Auszugssperre.
- ▶ Standardfarbe: Weißaluminium, individuelle Farbgestaltung durch farbige Schubladengriffe.
- ▶ Als Sonderausführung mittleres Element wahlweise in anderem Farbdesign möglich.
- ▶ Verschiedene Höhen lieferbar.
- ▶ Frei wählbares Zubehör aus der Zubehörliste ab Seite 104.

# Perfekt für die tägliche Visite: MPO IT-Wagen.

Die MPO Visiten-/IT-Wagen in ISO-Norm sind unverzichtbar bei der täglichen Visite. Alle Patientenunterlagen sind stets griffbereit, elektronisch oder analog als Akte. Die MPO IT-Wagen sind vielfältig einsetzbar für Laptop, Rechner und sonstige IT-Peripherie.



# Effizientes und mobiles Arbeiten.

Elegantes Design mit Platz für alles was bei der digitalen Pflegevisite benötigt wird.



MPO IT-Wagen Typ 1



MPO IT-Wagen Typ 2



MPO IT-Wagen Typ 3



MPO IT-Wagen Typ 4

Das ZARGES MPO Pflegevisitewagen verbindet die bewährten Logistik-Modulsysteme mit leistungsfähiger IT.

- ▶ Die variabel miteinander kombinierbaren, genormten Module, berücksichtigen die Bedürfnisse an jedem Einsatzort.
- ▶ Der Wagen ist vorbereitet für die Verwendung der vielfach eingesetzten ISO-Modulsysteme.

- ▶ Der Wagen ist vorbereitet für die Verwendung der vielfach eingesetzten ISO-Modulsysteme.
- ▶ Das System bietet Platz für alles, was in der Pflege benötigt wird.
- ▶ umfangreiches Zubehör ergänzt auf Wunsch den MPO Pflegevisitewagen

# Vielseitiges Zubehör zu Modularen Pflege- und Organisationswagen.

Neben zahlreichen erprobten Standard-Modellen haben Sie die Möglichkeit, alle MPO Funktionswagen Ihren täglichen Bedürfnissen anzupassen. So können Sie das System nach Ihren Vorstellungen einfach und werkzeuglos selbst gestalten.



Eckpfosten		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Zur Aufnahme von Zubehör 350 mm lang	46099	∅ 30
<b>Material:</b> Aluminium, eloxiert			

Normschiene seitlich		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Für Stirnseite, für Wagentiefe 400 mm	46488	565 × 40 × 105
	Für Stirnseite, für Wagentiefe 600 mm	46490	765 × 40 × 105
<b>Material:</b> Edelstahl			

Normschiene für Rückwand		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Für Rückseite, für Wagentiefe 400 mm	46169	687 × 40 × 98
<b>Material:</b> Edelstahl			

Bügelaufbau		Bestell-Nr.	Maße, L × B, mm
	Zur Aufnahme von Zubehör, Montage auf die Arbeitsplatte für Wagentiefe 400 mm	46418	662 × 560
<b>Material:</b> Aluminium, eloxiert und Edelstahl			

Normschiene für Bügelaufbau		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Zur Aufnahme von Zubehör, Erweiterung für Bügelaufbau für Wagentiefe 400 mm	46494	670 × 31 × 47
<b>Material:</b> Edelstahlschiene mit Kunststoff-Klemmstück			

Verlängerungssatz für Bügelaufbau		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Zur Aufnahme von Zubehör, Erweiterung für Bügelaufbau	46497	236 × 500 × 34

Universalspender 500 ml mit Abtropfschale		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Gehäuse aus Aluminium, Edelstahlpumpe mit kurzem Armhebel	46153	103 × 194 × 286

Dokumenthalter		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Zum Einhängen an Normschiene	46253	350 × 100 × 315
<b>Material:</b> Kunststoff, weiß			

Handschuhhalterung einfach		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Zur Aufnahme von Handschuhbox	<b>46168</b>	145 × 125 × 250
	<b>Material:</b> Stahl, kunststoffbeschichtet		

Handschuhhalterung dreifach		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Zur Aufnahme von 2 und 3 Handschuhboxen	<b>46170</b>	276 × 978 × 415
	<b>Material:</b> Stahl, kunststoffbeschichtet		

Handschuhhalterung Draht dreifach		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Zum Einhängen an Normschiene	<b>46331</b>	260 × 205 × 395
	<b>Material:</b> Stahl, kunststoffbeschichtet		

Handschuhhalterung einfach		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Zum Einhängen an Normschiene	<b>46332</b>	157 × 267 × 130
	<b>Material:</b> Stahl, pulverbeschichtet		

Abfallsammler geschlossen mit Fußbetätigung		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Mit Klappdeckel, 12 l	<b>46229</b>	254 × 248 × 423
	Mit Klappdeckel, 20 l	<b>46496</b>	410 × 170 × 400
<b>Material:</b> Stahl, kunststoffbeschichtet			

Abfallsammler offen		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Ohne Deckel, 12 l	<b>46163</b>	240 × 219 × 393
	Ohne Deckel, 20 l	<b>46487</b>	410 × 170 × 395
<b>Material:</b> Stahl, kunststoffbeschichtet			

Halterung für Halbmodul		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Zum festmontieren.	<b>46439</b>	450 × 360 × 80
	<b>Material:</b> Stahl, kunststoffbeschichtet, silber		

Abfallsammler 8 L		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Mit Kniebetätigung, zum einhängen	<b>46297</b>	220 × 220 × 360
	<b>Material:</b> Kunststoff		

Haltering		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Für Kanülen-Entsorgungsbox, zum Einhängen an Normschiene	46335	145 × 130 × 160
	<b>Material:</b> Stahl, pulverbeschichtet		

Haltering für Kanülenbox		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Zur Aufnahme von Kanülen-Entsorgungsbox	46152	100 × 70 × 150
	<b>Material:</b> Stahl, kunststoffbeschichtet		

Zipboxhalterung dreifach		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Zum Einhängen an Normschiene	46333	180 × 349 × 573
	<b>Material:</b> Stahl, kunststoffbeschichtet		

Drahtkorb für Normschiene		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Zum Einhängen an Normschiene	46334	128 × 405 × 146
	<b>Material:</b> Stahl, pulverbeschichtet		

Spritzenspender		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Zur Montage an Bügellaufbau 3 glasklare Schütten 4 glasklare Schütten 5 glasklare Schütten	46364 31004595 46365	600 × 198 × 228 600 × 207 × 245 600 × 136 × 164
	<b>Material:</b> Kunststoff, grau		

Spritzenspender (FIFO)		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Zur Montage an Bügellaufbau 3 glasklare Schütten 5 glasklare Schütten	46348 46349	600 × 200 × 245 600 × 135 × 165
	<b>Material:</b> Kunststoff, grau		

Katheterkocher		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Zum Einhängen an Normschiene	46391	162 × 95 × 560
	<b>Material:</b> Edelstahl, geschliffen		

1 Satz Aufnahmehaken		Bestell-Nr.	Maße, L × B × H, mm
	Für Planetten	46247	70 × 30 × 70

